



SYST'AM® P951D / SOPORTE PARA LA ESPALDA Y PAQUETE COMBO TERAPÉUTICO

SOPORTE PARA LA ESPALDA FABRICADO CON ESPUMA VISCOELÁSTICA CON EFECTO DE MEMORIA Y SUPERFICIE MULTISOPORTE

MATERIALES

80
kg/m³



Espuma Visco



Cubierta de POLYMAILLE® removible

Mantenimiento de la espuma:



(No sumergir en agua)

Limpieza de la cubierta POLYMAILLE®:



INDICACIONES

P951D / Soporte para la espalda y Paquete Combo Terapéutico que pueden ser utilizados para:

- 1- Mejorar el posicionamiento en la silla de ruedas.
- 2- Mejorar la orientación de asiento
- 3- Contribuir con la reducción del deslizamiento hacia adelante.
- 4- Contribuir con el alivio del dolor de espalda.



SISTEMA DE MONTAJE UNIVERSAL

→ Permite la adaptación del soporte para la espalda a la mayoría de los modelos de silla de ruedas.

VERSIONES DISPONIBLES



P951D / Soporte para Espalda con cubierta POLYMAILLE®.



Paquete Combo Terapéutico (Ver p. 46)

DENOMINACIÓN	TAMAÑO	CÓDIGO DE ÍTEM	TAMAÑOS W x L x H (cm / pulgadas)
P951D / Soporte para Espalda con Cubierta POLYMAILLE®	Pequeño	P951DS1HW	44 x 39 x 9 cm / 17 x 15 x 3,5"
	Estándar	P951DIHW	49 x 44 x 9 cm / 19 x 17 x 3,5"
	Grande	P951DL1HW	49 x 50 x 10 cm / 19 x 20 x 4"



GARANTIA

2
AÑOS



EL SOPORTE PARA LA ESPALDA SYST'AM® ES, JUNTO CON EL COJÍN PARA LA PREVENCIÓN DE LA ÚLCERA POR PRESIÓN: UN SISTEMA MUY COMPLEMENTARIO

- Proporciona alivio significativo de los puntos de presión en la columna.
- Reduce el riesgo de formación de úlceras en el área del sacro debido a la reducción de la inestabilidad sagital (deslizamiento hacia adelante).
- Reduce los efectos de rasgado en el área del sacro/glúteos gracias a un mejor soporte pélvico.

UNA FORMA ANATÓMICA

- Respeta la morfología de la espalda resultante de la cifosis.
- Respeta la anatomía de la zona lumbar baja, un aspecto importante de la postura.

MAYOR CONFORT DEL PACIENTE EN SILLA DE RUEDAS

- Acolchado lateral para proteger la zona axilardorsal del contacto con el marco de la silla, a menudo doloroso para los usuarios de sillas de ruedas

CUBIERTA




- En el área dorsal, tela elástica bilateral recubierta con poliuretano que respira y es completamente resistente al agua.



- Tela elástica, recubierta resistente al desgaste y restricciones del uso diario intensivo.



- Tela técnica altamente resistente, colocada en áreas sujetas a mayor fricción.

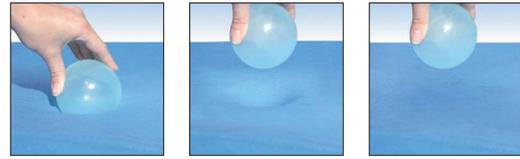

DESEMPEÑO DEL CONCEPTO MULTISOORTE



- La superficie multisopORTE permite una mejor distribución de las presiones, mediante la transferencia de presiones desde las áreas con baja capacidad de soporte hacia áreas con alta capacidad de soporte:

ÁREAS BLANCAS:

Áreas con baja capacidad de soporte (apoyo suave) libera la zona vertebral de picos de presión y favorecen el ajuste dorsal adecuada.





ÁREAS AZULES:

Áreas con alta capacidad de soporte (soporte más firme) transfiere la presión desde las áreas de alto riesgo y acentúa la estabilidad lateral.

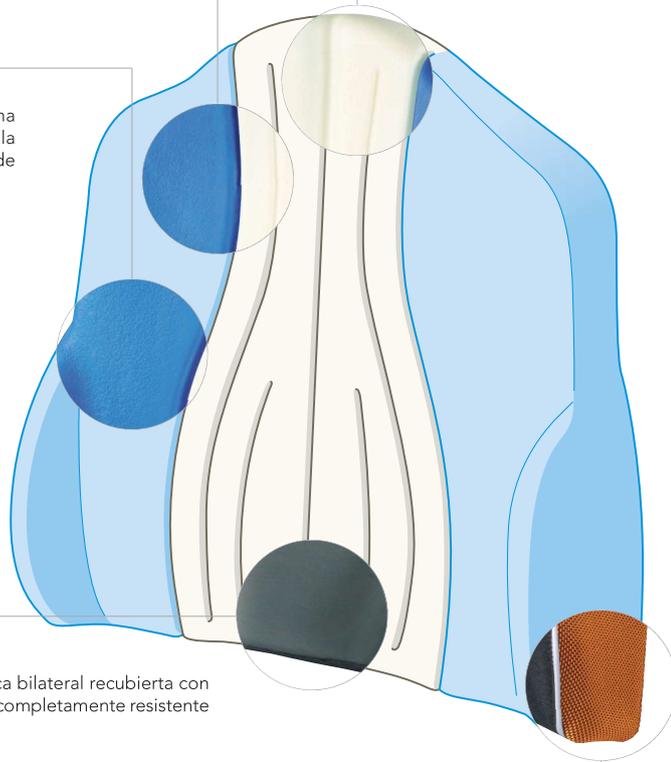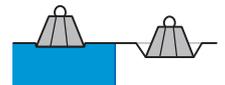

MEJORA DEL POSICIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DEL PACIENTE

- Mediante la estabilización del área pélvica, contribuye a evitar el deslizamiento y el riesgo de caída. Este es un problema permanente para los ancianos en casa y en ancianatos;
- Las "almohadillas" laterales reducen la inestabilidad lateral, la cual es frecuente para las personas con discapacidad.

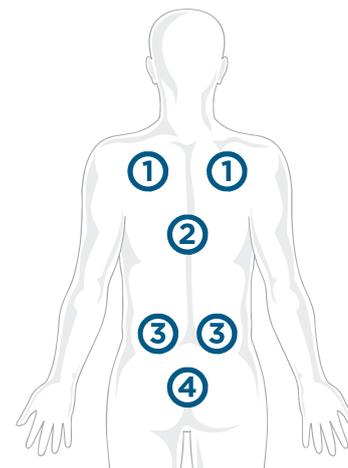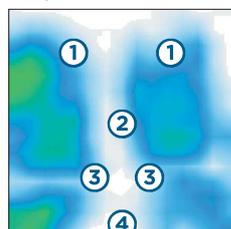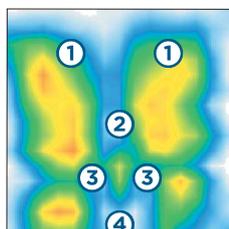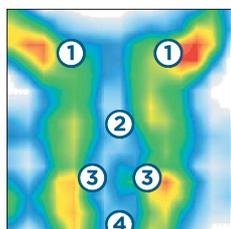

- ① OMÓPLATOS / HOMBROS
- ② ZONA VERTEBRAL
- ③ ZONA LUMBAR
- ④ ZONA DEL SACRO




PAQUETES TERAPÉUTICOS SYST'AM®


PERSONALICE SU PAQUETE TERAPÉUTICO
CON EL COJÍN DE SU ELECCIÓN.



1 Revise las dimensiones de su silla de ruedas

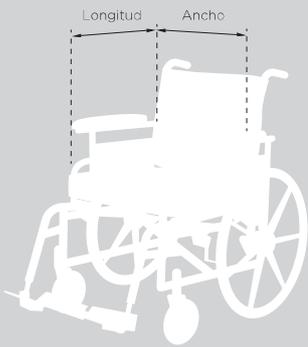

2 Seleccione el tamaño adecuado de cojín

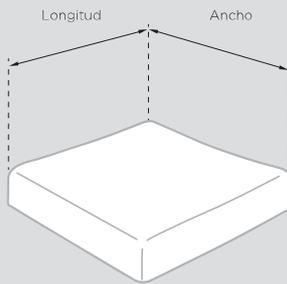

3 Seleccione el modelo deseado de cojín para las dimensiones correctas utilizando la siguiente tabla




4 Determine el tamaño del soporte para la espalda



RECOMENDACIONES

→ Considere una talla extra en profundidad (+ 2 / 3 cm) para uso con el soporte para la espalda.

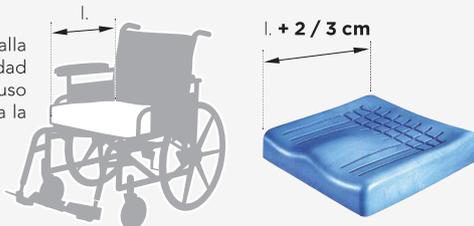

→ Siempre coloque el soporte para la espalda sobre el cojín

